

MÊME TECHNOLOGIE DE
CRYOTHÉRAPIE QUE CELLE
UTILISÉE PAR LES MÉDECINS

CRYOTAG

SKIN TAG REMOVER

RAPIDE
EFFICACE
SÛR



LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CRYOTAG

CRYOTAG est l'éliminateur d'acrochordons à usage personnel qui permet à l'utilisateur de supprimer vite et efficacement les acrochordons irritants ou disgracieux, laissant une peau d'apparence saine.

RAPIDE

Élimine les acrochordons à partir d'1 traitement.* La plupart des acrochordons tombe dans les 2 semaines.

EFFICACE

Efficacité prouvée.** Avec son applicateur à embout de précision et sa pince à épiler, Cryotag gèle instantanément le cœur de l'acrochordon. Contient 12 applicateurs (12 applications).

SÛR

Cryotag utilise la même technologie de cryothérapie que celle utilisée par les médecins et les dermatologues. Grâce à son applicateur à embout de précision, Cryotag cible uniquement l'acrochordon, laissant la peau environnante intacte.

Cryotag est UNIQUEMENT destiné à l'élimination des acrochordons. Lire la section A « Qu'est-ce qu'un acrochordon ? » pour vous aider à identifier correctement votre excroissance. Si c'est un acrochordon, lire attentivement le reste de ces instructions. Voir la Section H « Comment utiliser Cryotag? ».

NE PAS UTILISER CRYOTAG SI :

- Vous avez ou avez eu un cancer de la peau quel qu'il soit.
- Vous avez ou avez eu une lésion cutanée diagnostiquée comme précancéreuse, quel que soit son emplacement sur le corps

Si vous traitez une excroissance qui n'est pas un acrochordon, son traitement correct s'en verra d'autant retardé. Ce retard risque d'engendrer une affection ou maladie cutanée plus grave et d'abîmer la peau et les nerfs sains.

*Il est possible que certains acrochordons nécessitent des traitements additionnels. Vous pouvez traiter un acrochordon jusqu'à 4 fois, en laissant un intervalle de 2 semaines entre chaque traitement (4 cycles de traitement maximum). **Essais cliniques en 1993 et 2007.

Après le traitement, l'acrochordon peut foncer, signe que les tissus ont été détruits.

- La plupart des acrochordons tombe dans les 2 semaines, laissant place à de la peau saine.

D. QUAND NE PAS UTILISER CRYOTAG

Ne pas utiliser en cas de /sur :

- Diabète, de mauvaise circulation sanguine, d'affections sanguines diagnostiquées impactées par un froid extrême ou un système immunitaire affaibli. Cryotag agit en gelant l'acrochordon. Sur ces personnes, la zone traitée pourrait ne pas guérir bien ou complètement.
- Problèmes de saignement étant donné le risque de saignement après le traitement.
- Grossesse ou allaitement. Nous ne savons pas exactement l'effet que pourra avoir Cryotag sur les patients dans ces deux cas.
- Les enfants de moins de 18 ans dans la mesure où on ne sait pas exactement l'effet que pourra avoir ce produit.
- Ne pas utiliser sur des excroissances cutanées qui ne sont pas des acrochordons, ni sur des grains de beauté, les taches de naissance, les taches foncées, les excroissances poilues ou anormales. Si une excroissance cutanée qui n'est pas un acrochordon est traitée, son traitement correct s'en verra d'autant retardé. Ce retard risque d'engendrer une affection ou maladie cutanée plus grave et d'abîmer la peau et les nerfs sains.
- Ne pas utiliser dans la bouche, le nez, l'anus, les parties génitales, les fesses ou les lèvres ou sur des acrochordons à des endroits inaccessibles ou difficiles à voir. L'utilisation du produit sur ces zones pourrait engendrer des brûlures et des cicatrices permanentes.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée ou infectée présentant des signes de rougeur, démangeaison ou gonflement sous peine d'aggraver leur état et l'infection.
- Ne pas utiliser sur les yeux, les paupières, le visage ou les parties génitales sous peine de brûlures, de cicatrices permanentes ou de cécité.

E. MISES EN GARDE

- Ne PAS utiliser d'autre applicateur que ceux fournis avec le produit. Toujours utiliser un des applicateurs fournis avec le produit pour utiliser Cryotag. 1 applicateur par acrochordon.
- Ne PAS traiter plus de 1 acrochordon par endroit sur le corps à la fois. Tout acrochordon restant peut être traité séparément à intervalle de 2 semaines entre les traitements. Ceci minimise le

risque de « surgel », qui peut produire des brûlures et des cicatrices permanentes sur des tissus sains.

- Ne PAS traiter l'acrochordon pendant plus de 40 secondes sous peine de gel trop profond, ce qui risque d'abîmer la peau et de provoquer des cicatrices et/ou des lésions des nerfs. Geler un acrochordon trop en profondeur peut entraîner la mort des tissus locaux de la partie supérieure de l'épiderme.

F. AVERTISSEMENTS

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Danger, aérosol extrêmement inflammable.

Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.

- Éviter tout contact avec les yeux. Le contact avec les yeux pourrait rendre aveugle. Ne pas se frotter ni se toucher les yeux si Cryotag a été appliqué sur les mains. Si le produit entre en contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.
- Éviter d'inhaler et utiliser uniquement dans des lieux bien ventilés. On ne sait pas exactement l'effet qu'aura le contenu sur les poumons. Il est dangereux de respirer le contenu.
- Ne pas avaler. Le contenu est toxique et risque de causer des lésions internes graves. En cas d'ingestion accidentelle, contacter immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
- Pour usage externe uniquement.
- Utiliser uniquement comme indiqué. Une utilisation impropre délibérée en concentrant et inhalant le contenu peut être nocive ou mortelle. L'utilisation impropre de Cryotag risque de provoquer des brûlures et des cicatrices permanentes sur des tissus sains ou une cécité. Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner des lésions ou blessures graves.

CryoConcepts, LP
205 Webster Street,
Bethlehem, PA 18015 USA

Importer of Record: MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,
2595 AM The Hague, The Netherlands

CE Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague, Netherlands.

Distribué par Appia
Healthcare limited,
PO Box 1456, Guildford,
GU1 9RU, Royaume-Uni.

A. QU'EST-CE QU'UN ACRORCHORDON ?

Un acrochordon est une petite excroissance cutanée molle qui peut être en relief sur la peau et être reliée à la peau par une petite tige étroite. Les acrochordons sont généralement de couleur similaire à la peau avoisinante.

Ils se trouvent généralement sur le cou, sur la poitrine, sur le dos, sous les seins, sous les bras ou dans la zone de l'aîne. Ils sont plus courants chez les adultes d'âge moyen et les personnes âgées, les diabétiques et les personnes en surpoids. Les acrochordons sont inoffensifs et non contagieux. Ils ne sont généralement pas douloureux, mais ils peuvent être disgracieux ou irritants, et causer une gêne, surtout si quelque chose frotte dessus, comme des vêtements ou des bijoux.

En cas de doute sur la nature de l'excroissance cutanée, consultez un médecin.

Lisez tous les AVERTISSEMENTS avant d'utiliser le produit.

N'utilisez ce produit que si votre acrochordon a TOUTES les 4 caractéristiques illustrées ci-dessous.

Les acrochordons DOIVENT se trouver sur l'un de ces 5 endroits. Traitez seulement les acrochordons s'ils se trouvent sur le cou, la poitrine, sous les aisselles, dans le dos ou l'aîne.	Emplacement
Les acrochordons DOIVENT être de couleur similaire à la peau avoisinante.	Couleur
Les acrochordons DOIVENT être mous et souples. Vous devez pouvoir les bouger d'avant en arrière avec votre doigt. Ils doivent aussi être en relief, reliés à la peau.	Forme et toucher
Les acrochordons DOIVENT mesurer entre 2 et 6 mm.	Taille
Si votre acrochordon n'a pas TOUTES CES 4 caractéristiques, n'utilisez pas ce produit. Consultez un médecin au cas où vous auriez un problème de peau plus grave.	


Pour toute question sur le traitement des acrochordons non traitée dans cette notice, veuillez demander conseil à votre médecin ou dermatologue.

B. CONTENU DU KIT CRYOTAG

Cryotag contient 4 éléments, plus la notice.

1. Une bombe aérosol avec étui de sécurité attaché. La bombe aérosol contient un mélange de diméthyléther, d'isobutane et de propane. Ce mélange est extrêmement inflammable, mais pas toxique pour l'environnement
2. Un capuchon blanc qui maintient l'applicateur en place
3. 12 applicateurs à embout de précision pour 12 traitements
4. Une pince à épiler jetable

La notice contient des informations détaillées sur Cryotag, son indication, son mode d'action et son mode d'emploi pour enlever les acrochordons.

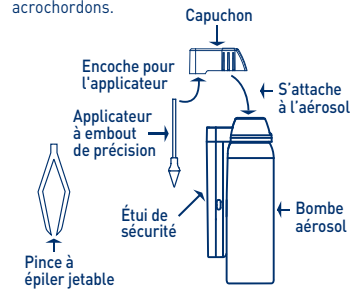

C. COMMENT AGIT CRYOTAG ?

Cryotag agit en gelant instantanément le cœur de l'acrochordon, en utilisant la même méthode de traitement que celle utilisée par les médecins. Le fait de geler l'acrochordon détruit les tissus, ce qui fera ainsi tomber l'acrochordon généralement en un seul traitement.

- Lorsque l'applicateur est appliqué sur l'acrochordon, la peau blanchit, signe qu'elle a gelé. Vous sentirez une grande sensation de froid et il se peut que vous ressentiez une légère douleur ou une sensation de picotement. Ces sensations sont temporaires et devraient s'estomper une fois l'application terminée et avec le temps.

Le traitement par le gel peut causer la formation d'une petite ampoule (contenant parfois du sang) dans les jours qui suivent. Ceci peut causer une légère gêne, mais, là encore, temporaire et qui disparaîtra avec le temps.

G. RISQUES ET EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Le gel détruit les tissus et commence le processus d'élimination de l'acrochordon. À la suite du traitement par le gel, une ampoule peut se former (contenant parfois du sang) dans les jours qui suivent.

- Des picotements, une irritation ou une douleur sont possibles durant ou après le traitement par le froid. Ces sensations ne sont que temporaires et s'estompent avec le temps.
- La cryothérapie peut causer un changement de couleur de la peau. La peau foncée pourra prendre un aspect plus clair ou la peau claire pourra devenir rouge ou plus foncée.

H. COMMENT UTILISER CRYOTAG ?

Cryotag est très facile à utiliser. Veuillez suivre les 4 étapes simples ci-dessous.

Lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. NE PAS VAPORISER DIRECTEMENT SUR LA PEAU. NE PAS UTILISER IMMÉDIATEMENT L'APPLICATEUR.

Ne pas tenir la bombe aérosol près du visage ou au-dessus de parties du corps ou de vêtements. Ne pas laisser de liquide entrer en contact avec la peau.

Préparatifs : Ayez une montre ou un chronomètre à portée afin de chronométrer le traitement.

1. Prenez un applicateur à embout de précision Cryotag par son long tube en plastique. Attachez l'applicateur à embout de précision au capuchon en le vissant fermement dans l'encoche située au bord, comme illustré.

2. Placez la bombe aérosol sur une table ou une autre surface robuste. Il est ainsi plus facile de presser sur le capuchon. Insérez l'applicateur avec le capuchon dans l'étui sur la bombe aérosol. Maintenez l'aérosol droit et appuyez à fond sur le capuchon pendant 3 secondes (vous entendrez un « pschitt »).

3. Retirez le capuchon avec l'applicateur de l'aérosol en gardant l'embout de l'applicateur dirigé vers le bas. N'utilisez pas immédiatement l'applicateur ; attendez 15 secondes avant de l'appliquer sur l'acrochordon. Ceci permet à l'embout de l'applicateur d'atteindre la bonne température.

4. Saisissez l'acrochordon avec la pince à épiler et tirez légèrement pour le détacher de sa base. Placez l'embout de l'applicateur sur la tige de l'acrochordon. Appliquez de façon continue pendant 40 secondes l'embout de précision sur la tige, mais pas plus. Ne pas taper.

Remarque : il est normal de sentir une douleur ou des picotements en cours de traitement et peu après. Retirez l'applicateur à embout de précision du capuchon et jetez-le, ceci après chaque utilisation. Aucune méthode spéciale de mise au rebut n'est nécessaire. Conservez la bombe aérosol, le capuchon, les applicateurs à embout de précision restants, la notice dans l'emballage d'origine pour une utilisation future.

I. TRAITEMENT DE SUIVI

Les acrochordons peuvent être supprimés en 1 seul traitement. Si l'acrochordon ne tombe pas dans les 2 semaines, il pourra être à nouveau traité (4 cycles de traitement maximum). S'il persiste après 4 cycles de traitement, cessez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

- Soyez attentif aux signes de développement d'une infection :

- Rougeur ou durcissement de la zone avoisinante.
- Zone traitée chaude au toucher.
- Écoulement jaune ou vert sortant de la zone traitée.
- Changement d'odeur de l'écoulement.
- Augmentation de la douleur ou douleur inhabituelle au niveau de la zone traitée.
- Fièvre.
- Stries rouges douloureuses sous la surface de la peau.

- Pour éviter toute infection :
- Maintenez la zone traitée propre.
- Protégez les ampoules avec un pansement si besoin est ; ne pas percer les ampoules.
- Ne pas tripoter ni gratter la zone traitée.

- Pour soulager une gêne :
- Si l'acrochordon frotte contre des vêtements ou des bijoux après le traitement et occasionne une gêne, protégez-le avec un pansement.
- La natation et les douches sont autorisées.
- Consultez votre médecin si le picotement, sensation de brûlures ou des douleurs persistent ou si vous pensez qu'une infection se développe sur la zone traitée.

Pour toute autre question ou information, veuillez consulter www.cryotag.fr.

©2020 CryoConcepts, LP, Bethlehem, PA 18015. Ce produit est protégé par un ou plusieurs brevets. Voir CryoConcepts.com/patents.