


SunstarGUM.com



(A)



(B)

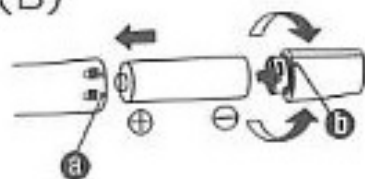

FR SPÉCIALEMENT CONCUE POUR LES PORTEURS D'APPAREILS ORTHODONTIQUES. Grâce à ses vibrations soniques douces et à la configuration unique de sa tête, cette brosse permet un meilleur nettoyage des dents¹. Les brins effilés ultra-fins et longs nettoient efficacement dans les zones difficiles d'accès. Les brins courts et arrondis, permettent un nettoyage complet des surfaces de l'émail et autour des bagues. Compacte, nomade et sans fil. Grande autonomie - jusqu'à 3 mois d'utilisation avec la pile AAA fournie².

Scanner le QR code ou visiter SunstarGUM.fr pour apprendre comment prendre bien soin de son appareil orthodontique.

(A) COMMENT REMPLACER LA TÊTE

Tout en tenant la base, tirer sur la tête. Placer la nouvelle tête sur la base et l'enfoncer. Remplacer uniquement par des recharges de la gamme GUM® SONIC.

(B) COMMENT REMPLACER LA PILE

Tourner et tirer vers le bas la base du manche. Remplacer par une nouvelle pile alcaline AAA. Lors du remplacement de la pile, suivre les symboles pour la positionner correctement. Fermer le capuchon et trier la pile conformément à la réglementation locale de collecte des déchets.

COMMENT UTILISER LA BROSSSE

Appliquer une petite quantité de dentifrice sur la tête de la brosse. Insérer la tête de la brosse à l'intérieur de la bouche. Allumer la brosse en appuyant sur le bouton central supérieur. Utiliser la même technique de brossage qu'avec une brosse à dents manuelle sans appliquer de force supplémentaire. S'assurer de brosser minutieusement sur et sous les bagues et élastiques. Appuyer sur le bouton central du bas pour l'éteindre. Demander conseil à son orthodontiste ou dentiste pour nettoyer au mieux ses bagues.

Il est recommandé de remplacer la tête de la brosse tous les 3 mois, ou dès que les brins sont abîmés, ou après avoir été malade.

COMMENT NETTOYER LA BROSSSE

Éteindre la brosse. Rincer la tête sous l'eau après le brossage.

ATTENTION ! Ne pas laisser à la portée des enfants. Possibilité d'étouffement. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 ans et plus, à n'utiliser que sous la supervision d'un adulte.

CONTENU DE L'ETUI : 1 brosse à dents sonique, 1 tête de brosse, 1 pile (AAA | LR03), 1 capuchon.

¹ vs. une brosse à dents manuelle orthodontique

² avec pile fournie pour 2 min de brossage 2 fois par jour

