

POST-OP DÉCHARGE AVANT-PIED

COURTE

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.

PERFORMANCE

La chaussure assure une décharge plantaire de l'avant-pied.

La chaussure limite la charge sur les métatarses.

CONTRE-INDICATION

Lésions de l'arrière-pied.

AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La chaussure ne doit pas être utilisée pieds nus.

La chaussure ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

Cette chaussure est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette chaussure, par exemple douleur ou apparition de signes locaux, retirer le dispositif et contacter votre professionnel de santé.

Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

La partie textile est capitonnée et respirante, le système de fermeture est par boucle ou double sangle.

L'ensemble des coutures est intégré dans le textile pour éviter les zones de frottement.

Convient aux pieds droit et gauche.

MISE EN PLACE

Un essayage est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors du réglage des sangles, ajuster de manière à obtenir un serrage ferme mais confortable.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver la chaussure à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Ne pas laver la chaussure par immersion, directement sous le jet d'eau.


Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille de l'orthèse à choisir en fonction de la pointure (EUR).

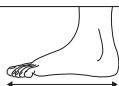

1	2	3
35-38	39-42	43-46

GIBAUD

**POST-OP DÉCHARGE
AVANT-PIED COURTE**

**POST-OP FOREFOOT
OFFLOADING SHOE SHORT**



(8269)

**POST-OP DÉCHARGE
AVANT-PIED LONGUE**

**POST-OP FOREFOOT
OFFLOADING LONG**



(8270)

**POST-OP À DÉCHARGE
DU TALON**

**POST-OP REARFOOT
OFFLOADING SHOE**



(8271)

FR | Notice d'utilisation

EN | Instructions for Use

IT | Istruzioni per l'uso

DE | Gebrauchsanweisung

POST-OP DÉCHARGE AVANT-PIED

LONGUE

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'avant-pied, notamment dans les cas suivants :

- Après chirurgie de l'avant-pied.
- Ulcère plantaire de l'avant-pied.
- Inflammation de l'avant-pied, œdème.
- Fractures ou blessures de l'avant-pied.
- Syndrome algoneurodystrophique.
- Crise de goutte.

PERFORMANCE

La chaussure assure une réduction de la pression plantaire sur l'avant-pied.

CONTRE-INDICATION

Lésions de l'arrière-pied.

AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La chaussure ne doit pas être utilisée pieds nus.

La chaussure ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

Cette chaussure est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette chaussure, par exemple douleur ou apparition de signes locaux, retirer le dispositif et contacter votre professionnel de santé.

Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

La partie textile est capitonnée et respirante, le système de fermeture est par boucle ou double sangle.

L'ensemble des coutures est intégré dans le textile pour éviter les zones de frottement.

Convient aux pieds droit et gauche.

MISE EN PLACE

Un essayage est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors du réglage des sangles, ajuster de manière à obtenir un serrage ferme mais confortable.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver la chaussure à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Ne pas laver la chaussure par immersion, directement sous le jet d'eau.


Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille de l'orthèse à choisir en fonction de la pointure (EUR).

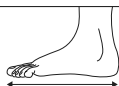

1	2	3	4	5	6	7
35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une décharge de l'arrière-pied, notamment dans les cas suivants :

- Fracture ou fissures du calcanéum.
- Blessures ou ulcères du talon.
- Bursite rétrocalcanéenne.

PERFORMANCE

La chaussure assure une décharge plantaire de l'arrière-pied.

CONTRE-INDICATION

Lésions de l'avant-pied.

AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La chaussure ne doit pas être utilisée pieds nus.

La chaussure ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Cette chaussure est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette chaussure, par exemple douleur ou apparition de signes locaux, retirer le dispositif et contacter votre professionnel de santé. Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

La partie textile est capitonnée et respirante et le dispositif a un système de réglage à boucle.

L'ensemble des coutures est intégré dans le textile pour éviter les zones de frottement.

Convient aux pieds droit et gauche.

MISE EN PLACE

Un essayage est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors du réglage des sangles, ajuster de manière à obtenir un serrage ferme mais confortable.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver la chaussure à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Ne pas laver la chaussure par immersion, directement sous le jet d'eau.


Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.




PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille de l'orthèse à choisir en fonction de la pointure (EUR).

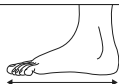


1	2	3	4
35-37	38-40	41-43	44-46

8269

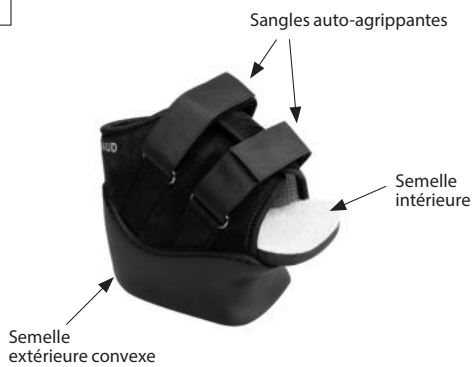

8270

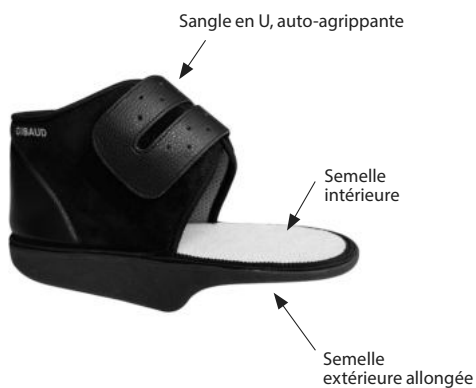

8271

