

## Notice d'utilisation



Corrosif

Lire attentivement les instructions avant utilisation.  
Conservez cette notice d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Réservé à l'usage externe.

Faites attention en ouvrant le bouchon, ne forcez pas et ne tirez pas. Retirez le bouchon lentement et manipulez avec précaution pour éviter tout déversement accidentel.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

# Objectif ZeroVerrue STYLO C

**CONTENU :**  
Objectif ZeroVerrue STYLO C, 3 ml.

**COMPOSANTS :**  
Acide formique (75 % en poids), eau, glycérol, colorant.

**DESCRIPTION :**  
Objectif ZeroVerrue STYLO C est une solution verrucide sous forme de stylo applicateur contenant 3 ml de solution.

**INDICATIONS :**  
Objectif ZeroVerrue STYLO C est une solution verrucide efficace qui peut être utilisée chez l'adulte et l'enfant dans le traitement des verrues des mains, des pieds, des coudes et des genoux.

**CARACTÉRISTIQUES :**  
La formule unique d'Objectif ZeroVerrue STYLO C aide le corps à dessécher les verrues et à les éliminer. La solution déshydrate la verrue, la sèche. Vous pouvez par exemple enfiler des chaussettes ou prendre un bain immédiatement après l'application.  
Objectif ZeroVerrue STYLO C ne cause ni cicatrice, ni infection lorsqu'il est utilisé correctement.  
Le contenu d'Objectif ZeroVerrue STYLO C suffit pour environ 30 applications.


### CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas appliquer sur les verrues du visage, des organes génitaux ou sur un molluscum, des taches de naissance, des cors, de la corne ou d'autres anomalies cutanées. En cas de doute sur le diagnostic, contactez votre médecin.
- Ne pas recouvrir la verrue avec un pansement après un traitement avec Objectif ZeroVerrue STYLO C. L'utilisation d'un pansement après le traitement peut endommager la peau.
- Ne protégez pas la peau normale entourant la verrue avec des huiles ou des lotions immédiatement avant, pendant ou après l'application.



- Ne pas utiliser si la verrue traitée devient sensible, si elle saigne ou si la peau est irritée. Interrompre le traitement jusqu'à ce que la peau ait récupéré.
- Ne pas utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO C en même temps que d'autres traitements verrucides.
- Ne pas utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO C si vous êtes allergique à l'un des composants.
- Ne pas utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO C si le stylo et/ou la pointe sont visiblement endommagés.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

 Objectif ZeroVerrue STYLO C est **corrosif** et dégage une odeur forte et irritante. Ne pas inhaler la solution. **Réservé à l'usage externe.**  
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**Ne pas utiliser avec excès !** Une application excessive ou incorrecte peut entraîner douleur et lésions de la peau.

- En cas d'application trop importante ou si vous répandez accidentellement la solution sur la peau environnante, rincez immédiatement et abondamment à l'eau froide pour limiter l'atteinte de la peau.
- En cas de contact de la solution avec **les yeux**, rincez immédiatement et de manière répétée à l'eau froide pendant au moins 15 minutes, et consultez un médecin. Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les immédiatement et rincez vos yeux comme indiqué.

Traiter les zones sensibles où la peau est plus fine, par exemple chez le petit enfant et sur le dos de la main, avec la plus grande prudence.

Ne pas endommager le stylo (ne pas ouvrir, couper ou percer).

### DOSAGE ET APPLICATION :

Lire attentivement les instructions avant utilisation car la solution est corrosive.

Veillez à ne toucher que la verrue et évitez de toucher la peau environnante ; si vous touchez la peau environnante ou si elle pique, lavez immédiatement à l'eau froide pour apaiser la douleur.



### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS PENDANT LE TRAITEMENT :

- **Conserver la verrue molle** entre deux applications en appliquant une lotion ou une huile pour peau normale. Les débris de verrue se détacheront plus facilement.
- La couleur est uniquement destinée à vous guider lors de l'application d'Objectif ZeroVerrue STYLO C et à vous assurer que la solution est appliquée sur la verrue. Entre les applications, l'intensité de la couleur sur la verrue peut changer : ne modifiez pas la procédure d'application mentionnée ci-dessus, ni la fréquence.
- **NE PAS APPLIQUER EN QUANTITÉ EXCESSIVE** - traiter strictement pendant trois secondes maximum et seulement sur la verrue.
- Si vous ressentez une brûlure ou notez une irritation (peau devenant rouge, fourmillements, picotements), arrêter le traitement. Ne pas recommencer le traitement tant que l'irritation n'est pas soignée.
- Si le produit ne fonctionne pas contre la verrue après plusieurs traitements, veuillez contacter votre spécialiste.
- Si la verrue ne régresse pas après avoir traité une fois par semaine, traiter deux fois par semaine ou tous les deux jours tant que la peau n'est pas irritée.
- Au début du traitement, la verrue peut aussi devenir blanche et grossir avant de commencer à sécher. Lorsqu'elle grossit, la peau adjacente peut devenir sensible. Faire attention qu'il n'y ait pas de quantité excessive de peau sur la verrue, voir ci-dessous.
- Si la verrue devient sensible ou si vous ressentez des élancements, cela peut être dû au fait que vous ayez appliqué trop de solution, ou que la verrue ne parvient pas à traverser la peau qui la recouvre.  
Si la peau recouvre la verrue, une incision doit être pratiquée par exemple à l'aide d'une pince à épiler pour libérer la verrue. En cas de verrue **ancienne ou dure**, humidifier la en plongeant la zone concernée dans de l'eau chaude jusqu'à ce que la peau se ramollisse. Pincez ou grattez la peau sur le dessus de la verrue, par exemple à l'aide d'une pince à épiler. Pour les verrues **épaisses** qui poussent vers l'intérieur (verrues des pieds), retirer la peau dure avec précaution. En cas de **verrues sur une cuticule**, il faudra peut-être pratiquer un petit trou dans la couche supérieure de l'épiderme pour que le verrucide puisse accéder à la verrue. Ne pas limer les verrues sans recommandations médicales. Elles risqueraient de devenir sensibles et de former une nouvelle surface dure.
- Généralement, des **points noirs** apparaissent sur la verrue après plusieurs applications. Il s'agit de minuscules vaisseaux sanguins qui poussent au cœur de la verrue pour l'alimenter. Ils indiquent que la verrue ne va pas tarder à disparaître. Continuer le traitement jusqu'à ce que les points noirs et la verrue aient complètement disparu. Il peut arriver que ces points noirs saignent un peu si vous avez gratté la verrue. Attendez alors quelques minutes l'arrêt du saignement avant d'appliquer Objectif ZeroVerrue STYLO C pour éviter toute sensation de picotements. En cas de sensation de picotements, appliquer de l'eau froide pour apaiser la douleur.

### UTILISATION CHEZ LES ENFANTS :


Chez l'enfant, l'application doit toujours être effectuée avec précaution par un adulte, la solution étant corrosive. Les jeunes enfants ont une peau fragile et fine. Utiliser très peu de solution Objectif ZeroVerrue STYLO C sur leurs verrues. En général, les verrues disparaissent au bout de 2 à 3 applications.

Il est possible de traiter les enfants de **moins de 4 ans** avec Objectif ZeroVerrue STYLO C, mais il convient de s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une verrue, et non d'une autre anomalie cutanée. Avant le traitement, consulter votre médecin traitant ou votre pédiatre. Pour les enfants de moins de 4 ans, il est particulièrement important de réduire la dose. Traiter **moins souvent**, par exemple une fois toutes les deux ou trois semaines.


- Appuyer légèrement avec le stylo sur la verrue **une seule fois** pendant trois secondes et colorer la surface de la verrue avec la solution.
- Faire attention à ne pas toucher la peau environnante.
- Si l'enfant a tendance à sucer l'endroit où se trouve la verrue, vous pouvez laver la zone traitée avec de l'eau. La solution a déjà pénétré dans la verrue.
- Si cela brûle ou pique lors de l'application, rincer la verrue à l'eau froide et **ne plus appliquer de solution**. Elle a déjà pénétré dans la verrue.

Si l'enfant ressent une brûlure ou remarque une irritation (peau devenant rouge, fourmillements, picotements), arrêter le traitement et ne pas le recommencer tant que l'irritation n'est pas soignée.

### UTILISATION CHEZ LES DIABÉTIQUES :

 Les personnes souffrant de diabète ne doivent appliquer Objectif ZeroVerrue STYLO C que **sur une peau saine** (non lésée par une affection liée au diabète) et avec la plus extrême prudence. En cas de problème, toujours consulter votre médecin/infirmière ou podologue.

### UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT :

 Il n'y a pas de risque connu à utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO C chez les **femmes enceintes et/ou allaitantes**.


Pour éviter une application sur la peau environnante, faire preuve de prudence et tenir fermement le stylo lors de l'application. Un écoulement pourrait endommager la peau ou endommager les surfaces peintes, les textiles, etc. Après utilisation, refermer correctement le stylo.

Objectif ZeroVerrue STYLO C peut être utilisé par plusieurs personnes. Avant qu'une autre personne ne commence à utiliser Objectif ZeroVerrue STYLO C après vous, refermez le stylo, maintenez le stylo droit avec le capuchon vers le bas pendant au moins 5 minutes, de sorte que la pointe du stylo reste en contact avec la solution. Cela évite que l'autre personne ne soit contaminée par vos verrues.

Seule une petite quantité de solution d' Objectif ZeroVerrue STYLO C est nécessaire pour être efficace.

Le stylo délivre une très petite quantité de solution colorée quand la pointe est pressée sur la verrue. Le stylo peut paraître sec. Le stylo a été conçu pour ne délivrer que la quantité de solution nécessaire au traitement de la verrue. Afin de s'assurer que le stylo fonctionne, appuyer la pointe du stylo sur une feuille. Vous verrez une trace humide et/ou colorée sur le papier. Vous remarquerez aussi une odeur âcre du produit en enlevant le bouchon.

Illustration 1

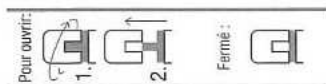

Pour ouvrir le stylo, tourner le bouchon jusqu'à ce que la bande bleue soit alignée avec l'encoche du bouchon. Une fois ces 2 éléments alignés, le bouchon peut être retiré en toute sécurité.

Faites attention en ouvrant le bouchon, ne forcez pas et ne tirez pas. La solution pourrait s'échapper du stylo. Pour fermer le bouchon, poussez-le en arrière fermement et tourner vers la position fermée. Voir l'illustration 1, ci-dessus.



Procéder à l'application :

- Appuyez légèrement la pointe du stylo contre la verrue et colorez la surface de la verrue avec la solution.
- Appliquer uniquement sur la verrue, en recouvrant toute la verrue (Illustration A)
- Pour les grosses verrues - incliner le stylo (Illustration B)
- Appliquer pendant **trois secondes**
- Ne pas appliquer sur la peau saine

Illustration A



Illustration B



Pour des résultats optimaux, traiter **régulièrement**, une fois par semaine, jusqu'à disparition complète de la verrue, sous peine d'interrompre le processus. Si le traitement est irrégulier, l'ensemble du processus est plus long.

**CAS PARTICULIERS :**

- Vous pouvez essayer une application plus **fréquente** pour des verrues plus **grosses et/ou plus anciennes**, les verrues **plantaires** et les verrues avec une **couche cutanée épaisse**.
- Une seule application toutes les deux ou trois semaines peut être suffisante lorsque vous traitez des verrues sur une **peau fine (comme sur le dessus des mains/pieds/doigts)**.
- Les verrues situées sur le **dos des mains, ou le dos du pied, ou sur la face interne des genoux ou la face externe des coudes**, où la peau est plus sensible, doivent être traitées avec précaution pour éviter de toucher la peau environnante.
- Si vous traitez **plusieurs verrues**, commencer par un traitement de deux semaines sur quelques verrues afin de voir comment la peau réagit. Si la peau n'est pas abîmée, initier le traitement des autres verrues. Commencez par les plus grosses verrues.

**DURÉE DU TRAITEMENT :**

Objectif ZeroVerrue STYLO C est très efficace. La plupart des verrues disparaissent définitivement. Parfois les verrues qui sont présentes sous la peau peuvent ressortir, quand vous commencez le traitement.

Les verrues peuvent avoir des aspects très différents et le temps nécessaire à leur disparition peut donc être variable. Le plus souvent, 5 à 15 applications sont nécessaires, mais le traitement peut être plus court ou plus long. L'âge, le type de verrue, l'état du système immunitaire, l'emplacement de la verrue et son ancienneté influent sur la durée du traitement. L'affaiblissement des défenses immunitaires et/ou la prise de médicaments tels que la cortisone sont des facteurs qui peuvent l'allonger. En général, les verrues récentes sont plus faciles à éliminer que les anciennes. Chez les enfants, elles disparaissent habituellement plus vite que chez les adultes. Pour les verrues qui poussent vers l'intérieur et les verrues de cuticule présentes depuis de nombreuses années, les résultats visibles peuvent être longs à apparaître, et la verrue peut être encore plus longue à disparaître complètement.

**Interrompre le traitement avec Objectif ZeroVerrue STYLO C** si aucun point noir n'est visible ou si la verrue est tombée ou s'est flétrie, ou encore s'il y a un « creux » à la place de la verrue. La peau retrouve son aspect normal par la suite. Si vous poursuivez trop longtemps le traitement une fois la verrue éliminée, la peau devient rose et suinte légèrement. Il faut alors arrêter immédiatement l'utilisation d'Objectif ZeroVerrue STYLO C. Quelques semaines plus tard, vérifiez l'emplacement de la verrue ; la présence d'un petit point peut indiquer des restes de verrue. Il faut alors appliquer Objectif ZeroVerrue STYLO C de nouveau.

Après le traitement, fermer le stylo avec le capuchon et éliminer le dispositif vide conformément à la réglementation en vigueur sur l'élimination des déchets ménagers.

**EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS :**

Des effets secondaires temporaires peuvent survenir au niveau du site d'application, par exemple : sensibilité, sensation de picotement, douleur, rougeur, sensation de brûlure ou saignement des capillaires sanguins. Interrompre le traitement jusqu'à ce que la peau ait récupéré.

L'utilisation excessive ou une application incorrecte peut entraîner des effets secondaires sévères, par exemple : formation d'une cloque, plaie, pigmentation sombre de la peau, brûlure chimique, inflammation, mort tissulaire (nécrose) ou formation d'une cicatrice. La zone endommagée doit être maintenue propre pour éviter une infection. Le cas échéant, arrêter le traitement ; contacter un médecin en cas de lésion sérieuse de la peau.

Les émanations d'Objectif ZeroVerrue STYLO C sont irritantes pour le système respiratoire et les yeux. Ne pas inhaler la solution contenue dans le stylo. Les effets indésirables peuvent par exemple être une irritation du système respiratoire et/ou de la gorge, un nez qui coule, des yeux qui pleurent ou une difficulté à respirer. Des cas isolés de réactions allergiques telles que rougeurs, urticaire et démangeaisons ont été décrites.

En cas d'incidents graves, veuillez contacter immédiatement Meda Pharma S.p.A. et votre autorité nationale compétente.

**CONTENU DU CONDITIONNEMENT :**

Stylo applicateur contenant 3 ml de solution avec un bouchon à ouverture en 2 étapes, notice d'utilisation.

**CONSERVATION :**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.









Conserver entre 15 et 25°C, de préférence en position verticale avec le bouchon tourné vers le bas.

**DURÉE DE CONSERVATION :**

Voir la date de péremption indiquée sur le stylo et la boîte. Utiliser dans les 6 mois qui suivent l'ouverture du stylo.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est juillet 2022.

**SYMBOLES SUR LE CONDITIONNEMENT :**

|  |  |
|--|--|
|  Fabricant              |  Attention                                |
|  Date d'expiration      |  Consulter les instructions d'utilisation |
|  Numéro de lot          |  Distributeur                             |
|  Limites de température |  Dispositif Médical                       |



Meda Pharma S.p.A.,  
Via Valosa 9, 20900 Monza, Italie

Viatrix Santé, 1 Rue de Turin,  
69007 Lyon, France

30WPVIA.FR.1.00  
www.objectifzerverrue.fr

77282399  
16660

