



People.Health.Care.™

Suprasorb® P sensitive **NOUVEAU**

Pansements hydrocellulaires siliconés.

Pansements adaptés aux plaies faiblement à fortement exsudatives.

1 Protection¹

2 Douceur et confort²

3 Gestion efficace de l'exsudat³

Cinq couches de douceur pour les peaux sensibles⁴

Film externe protecteur :

- ❑ taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) élevé¹
- ❑ doux et conformable⁵
- ❑ imperméable à l'eau⁶
- ❑ forme une barrière contre les bactéries⁶

Noyau super-absorbant :

uniquement pour la version „border“

- ❑ fibres polymères super-absorbantes
- ❑ bonne capacité d'absorption¹⁷
- ❑ aide à limiter le risque de macération⁷

Couche non tissée :

- ❑ aide à répartir les exsudats

Mousse absorbante en PU* :


- ❑ gestion efficace des exsudats³
- ❑ conçu pour offrir un confort et une protection atténuant les chocs⁸

Couche de contact avec la plaie en silicone OptiSil :

- ❑ technologie alliant perforations et huile de silicone
- ❑ permet à l'exsudat d'être absorbé rapidement dans le pansement⁹
- ❑ doux et minimise la douleur lors du retrait du pansement^{2, 10}
- ❑ limite le risque d'adhérence à la plaie¹¹

* polyuréthane

Suprasorb® P sensitive Border**

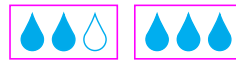

Pour les plaies moyennement à fortement exsudatives


**border
(avec bord auto-fixant)

Suprasorb® P sensitive Border lite***



Pour les plaies faiblement à moyennement exsudatives

***border lite
(extra mince avec bord auto-fixant)

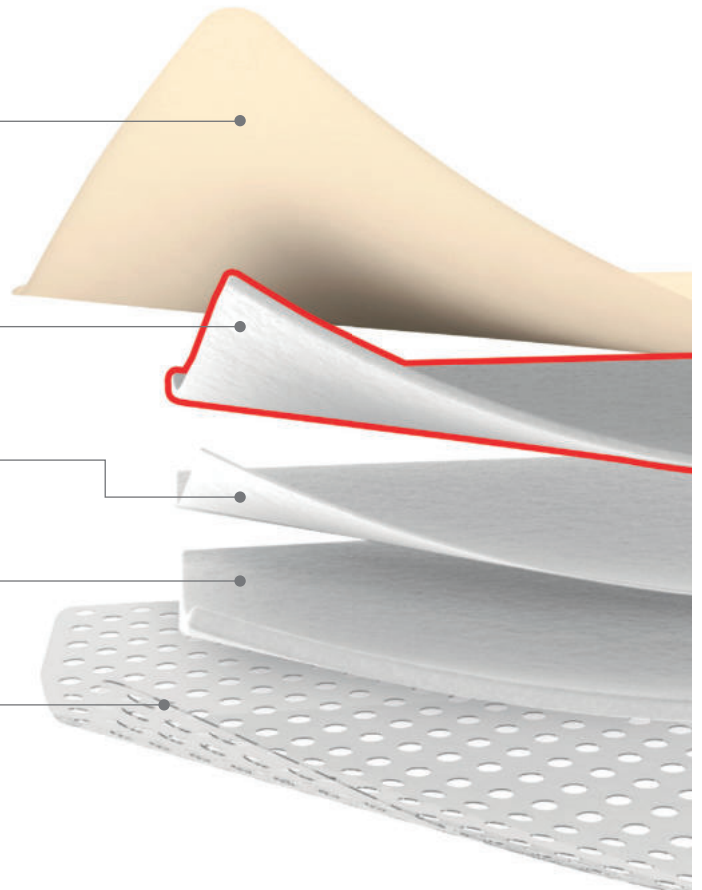



Suprasorb® P sensitive NOUVEAU

Avantages

Douceur et confort

- ❖ adhère en douceur²
- ❖ limite le risque d'adhérence à la plaie lors des changements de pansements¹¹
- ❖ confortable grâce à sa mousse absorbante en PU¹³

Protection¹

- ❖ imperméable à l'eau et aux bactéries
- ❖ perméable à la vapeur d'eau

Gestion efficace de l'exsudat³

- ❖ facilite une absorption rapide de l'exsudat dans le pansement⁹
- ❖ maintient un milieu humide de la plaie¹⁴



Couche de contact avec la plaie en **silicone** adaptée pour les **peaux fragiles**⁴



Gestion efficace de l'exsudat permettant de limiter le **risque de macération** et de favoriser la cicatrisation^{3, 15}



Minimise la **douleur** et le **traumatisme** sur la plaie et la peau pendant le retrait ou le repositionnement du pansement¹⁷



Peut être conservé sous la **douche**¹⁶

Application facile¹²

grâce à ses 2 ou 3 feuillets permettant d'éviter de toucher l'adhésif avec les gants



Suprasorb® P sensitive NOUVEAU

stérile, scellé en emballage individuel, boîte de 10 pièces

LPP

Taille (cm)	Compresse (cm)	Réf. Hôpital	Réf. Ville	EAN	Unité*
border**					
7,5 x 8,5	4,5 x 5	139 068	109 068	4056649355366	200
10 x 10	6,2 x 6,2	139 061	109 061	4056649355182	200
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	139 062	109 062	4056649355205	200
15 x 15	10,5 x 10,5	139 069	109 069	4056649355380	150
20 x 20	15 x 15	139 070	109 070	4056649355434	100
border lite***					
5 x 5	2,5 x 2,5	139 080	109 080	4056649356165	240
5 x 10	2,5 x 6	139 081	109 081	4056649356189	200
7,5 x 8,5	4,5 x 5	139 086	109 086	4056649356288	200
10 x 10	6,2 x 6,2	139 083	109 083	4056649356226	200
9 x 15	5 x 10,5	139 087	109 087	4056649356301	200
10 x 20	5 x 15	139 088	109 088	4056649356325	150

* Unité de conditionnement (pièces / carton), ** border (avec bord auto-fixant)
*** border lite (extra mince avec bord auto-fixant)

Sources :

- 1) DF-2018-050 2) DF-2018-051 3) DF-2018-052 4) DF-2018-053 5) DF-2018-054
- 6) DF-2018-055 7) DF-2018-056 8) DF-2018-057 9) DF-2018-058 10) DF-2018-059
- 11) DF-2018-060 12) DF-2018-061 13) DF-2018-062 14) DF-2018-063
- 15) DF-2018-064 16) DF-2018-065 17) Notice d'utilisation

Suprasorb P sensitive border est un dispositif médical de classe IIb indiqué dans la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives.

Pris en charge par l'assurance maladie assurée dans le cadre du traitement des plaies aiguës, sans distinction de phase et traitement des plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Codes LPP : 1351747, 1365117, 1393616, 1335866, 1358152.

Suprasorb P sensitive border lite est un dispositif médical de classe IIb indiqué dans la prise en charge des plaies légèrement à moyennement exsudatives.

Pris en charge par l'assurance maladie assurée dans le cadre du traitement des plaies aiguës et plaies chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement. Codes LPP : 1351262, 1318030, 1321982, 1356319, 1322326, 1307700.

Fabriqué par Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & CO KG. Lire attentivement la notice d'utilisation. Evaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123). AR-201901-011.

Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S.

ZA de Choisy · 88200 Remiremont · SIREN 380 236 091
RCS Epinal B 380 236 091