

Urinocol® Pédiatrie

Prematuré

Conditionnement Ville

Libellé	Poids de l'enfant/ Contenance de la poche	Référence	EAN 13	Nombre d'unités /Boîte
Urinocol® Pédiatrie sans écoulement Garçon	> 2 500 g 120 ML	227549R	4039239546184	20
Urinocol® Pédiatrie sans écoulement Fille		227559R	4039239546207	20
Urinocol® Pédiatrie avec écoulement Garçon		227547R	4039239546092	50
Urinocol® Pédiatrie avec écoulement Fille		227567R	4039239546122	50

Conditionnement Hospitalier

Libellé	Poids de l'enfant/ Contenance de la poche	Référence	EAN 13	Nombre d'unités /Boîte
Urinocol® Pédiatrie sans écoulement Garçon	> 2 500 g 120 ML	227550R	4039239541714	100
Urinocol® Pédiatrie sans écoulement Fille		227560R	4039239541721	100
Urinocol® Pédiatrie avec écoulement Garçon		227546R	4039239541738	50
Urinocol® Pédiatrie avec écoulement Fille		227566R	4039239541752	50
Urinocol® Pédiatrie Prématuré Mini avec Prolongateur	< 1 200 g 35 ML	227572R	4039239541776	50 (+50 raccords)
Urinocol® Pédiatrie Prématuré Standard avec Prolongateur*	1 200 – 2 500 g 47 ML	227573R	4039239541769	50 (+50 raccords)

* en PVC : sans DEHP



Fabriqué et Distribué par :
B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt - France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Les poches Urinocol® Pédiatrie sont utilisées en pédiatrie pour le recueil des urines dans le cadre de la diurèse ou pour analyses biochimiques, cytologiques et bactériologiques. Ce sont des dispositifs médicaux de Classe I stériles, certifié CE : CE₀₁₂₃, non pris en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquette.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Photos non contractuelles.



URINOCOL® Pédiatrie

Recueil des urines en pédiatrie

Urinocol® Prematuré


Recueil urinaire pour les nouveau-nés et prématurés de < 1 200 g à 2 500 g

- 2 tailles : Mini et Standard (en fonction du poids du nouveau-né)

Forme spécifique de l'adhésif avec soudure de type « parachute » pour le maintien de la poche sur la peau.



Bouchon sécurisé avec 2 niveaux d'ouverture.

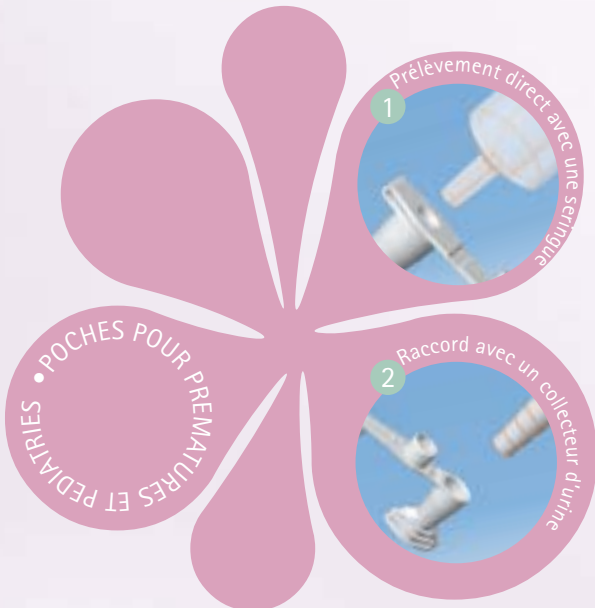

Prolongateur pour le raccord à une poche collectrice.
Facilite le recueil des urines en couveuse.


Urinocol® Pédiatrie



VIDANGEABLE
Poche avec écoulement
■ Permet la connexion à une poche collectrice dans le cadre de la diurèse.




NON VIDANGEABLE
Poche fermée
■ Prélèvement pour examen cytot bactériologique des urines.

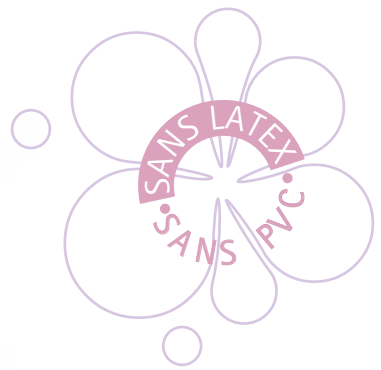

Pour les nourrissons > 2 500 g

- Forme adhésive adaptée à l'anatomie des petites filles et des petits garçons.
- Transparent : permet un contrôle visuel permanent de l'urine.
- Matériel : poche sans PVC / adhésif sans latex.

Forme anatomique du support adhésif

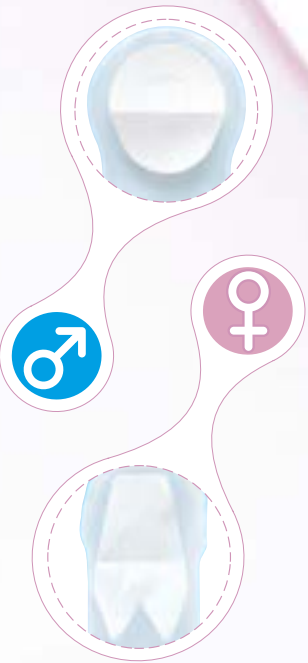

Adapté à l'anatomie des garçons et des filles

Urinocol® Pédiatrie

Appliquez étape par étape pour les petites filles :

- IMPORTANT ! Veillez à bien choisir la taille de la poche en fonction du poids de l'enfant.
- Préparez la peau : elle doit être propre, sèche et non recouverte de poudre ou crème et ne présenter aucune irritation.
- Suivez les instructions ci-dessous :



Détachez et jetez la découpe centrale.
Retirez la partie inférieure du papier protecteur.



Appliquez avec une légère pression autour de l'appareil urinaire.



Retirez la partie supérieure du papier protecteur.



Appliquez la poche autour de la vulve en appuyant sur l'adhésif pour garantir une bonne adhérence.